



מכשיר עיסוי צוואר וכתפיים - מדריך למשתמש

קרא בבקשה בקפידה את הוראות ההפעלה לפני השימוש במוצר

oCuddle plus



תודה שרכשת ם bool !

בכל רכישה שלכם אתם מבטיחים לעצמכם אחריות יבואן מלאה ואבא ואמא שמלווים אתכם הרבה אחרי הקנייה.

רק נציין שכלל המוצרים הנמכרים באתר ובחנויות הרשת הם באיכות הגבוהה ביותר ללא פשרות, מלווים באחריות מורחבת ובאישור מכון התקנים הישראלי.

" מומלץ להיוועץ עם רופא לפני השימוש "

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחו. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

אזהרה!

כדי להמנע מסכנת התחשמלות יש ליישם את ההוראות הללו:

אין לפעול מתחת לשמיכה או לכרית למנוע התחממות יתר על המידה



אין לנתק את כבל המתח ע"י משיכתו



השתמש במוצר זה רק עם אספקת החשמל שסופקה יחד איתו



אל תשתמש במקומות בהם ישנה קורוזיה או חמצן מוגבול



אל תשתמש במקומות לחים או רטובים



אל תשאיר את המוצר ברכב למניעת התחממות יתר



אל תשאיר את המוצר בחוץ



שים לב! קרא את ההוראות בקפידה לפני השימוש במוצר:

השתמש במוצר זה רק למטרתו המיועדת	
נא לכבות את המכשיר בסיום השימוש	
אין להשאיר את המוצר מחובר לחשמל ללא השגחה	
יש להזהר מהתחממות יתר	
הרחק את הכבל ממשטחים מחוממים	
אנא שים לב לבלאי, במידה וישנו חלק תקול פנה לשירות והחלף את החלק הפגום	
אין להשתמש במוצר אם ישנו חלק כלשהו פגום, או במידה ונרטב במים	
במידה ואתה מרגיש כאב או אי נוחות – עצור מיד את השימוש	
אל תשתמש במוצר אם הוא לא עובד כהלכה	
אין להשתמש במוצר תוך כדי נהיגה	

המוצר אינו מתאים לילדים!

שים לב! אם אתה סובל מאחת או מכמה מהבעיות הללו – היוועץ עם
רופא לפני השימוש:

אנשים בעלי מוגבלות פיזית



בעיות פסיכיאטריות



מטופלים בכדורים



נשים בהריון



נשים במחזור




מצב רפואי רגיש



בעיות לב



אזורי עיסוי:

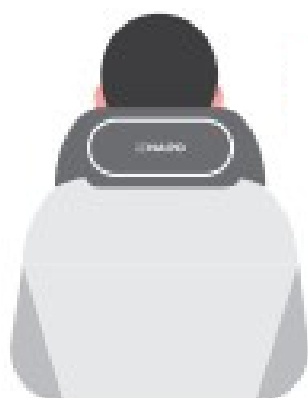

צוואר



כתפיים



גב




גב תחתון

מה בקופסא :



רצועת עיסוי

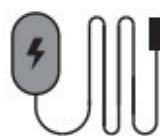


מטען קיר

מדריך הפעלה :

הוראות שימוש

- ☐ הנח את הרצועה באיזור הרצוי
- ☐ לחץ לחיצה ממושכת כ-2 שניות על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המוצר העיסוי והחימום יחלו אוטומטית
- ☐ 'טיימר ברירת המחדל הוא 15 דק
- ☐ לחץ על לחצן התאמת כיוון העיסוי כדי לשנות את כיוון העיסוי
- ☐ לחץ על לחצן התאמת המהירות כדי לבחור בין 3 רמות מהירות עיסוי: נמוך בינוני, גבוה
- ☐ לחיצה נוספת על לחצן ההפעלה תפסיק את העיסוי

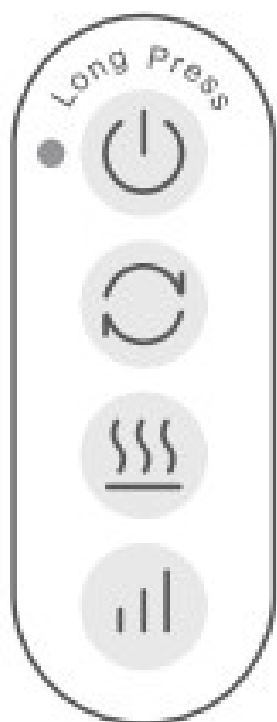

הפעלה

חימום

מהירות עיסוי

סוללה :

- ☐ המחווין ידלק באדום כאשר הסוללה של המוצר חלשה
- ☐ הכנס את הקצה הגלילי של כבל המטען ליציאת הטעינה של המוצר וחבר לחשמל.
- ☐ מחזור טעינה מלא אורך כ- 4 שעות, במהלך הטעינה המחווין יהבהב באדום עד לסיום אז הנורה תתחלף לירוק
- ☐ ניתן להשתמש במוצר ברציפות במשך כ- 60 דק' במכשיר כאשר הוא טעון במלואו
- ☐ ניתן להשתמש במוצר כאשר הוא מחובר למקור המתח

ניקוי ואחסון :

- כדי למנוע קורוזיה, המנע באחסון המוצר במקומות לחים או רטובים
- לפני ניקוי המוצר וודא כי המוצר מכובה והתקע נמצא מחוץ לחשמל, נקה אך ורק עם מטלית יבשה
- שמור על המוצר נקי, ותאחסן אותו במקום בטוח
- הרחק את המוצר ממפגעי סביבה או טמפי' קיצונית

פתרון תקלות:

פתרון	תקלה
הטען את המוצר במלואו – כ- 4 שעות	המוצר לא עובד כראוי
נסו לחבר טוב את כבל הטעינה או לחלופין נסו מקור מתח אחר בביטחון	המוצר אינו נטען
'טיימר ההשהייה פעל לאחר 15 דק'	המוצר הפסיק לעבוד תוך כדי פעילות
אל תשתמשו במוצר – פנו לשירות	המוצר הפסיק לעבוד עקב נוזל

הערה:

אל תפרק את המוצר בעצמך, לא ינתן שירות במידה ובוצע שימוש שאינו ראוי במוצר

במידה ותזדקק לעזרה – צור קשר עם השירות

NAIPO לא תישא באחריות במקרים הבאים: פירוק, נזק מלאכותי, אריזה

פנימית וחיצונית פגומה, נזק שנגרם מכח עליון, פגה תקופת האחריות

למוצר ישנה סוללה פנימית שאינה ניתנת להחלפה, במידה והסוללה ניזוקה

השלך את המוצר בהתאם לתקנות המדינה

מפרט טכני :

Ocuudle plus shoulder massager	שם המוצר
Ocuudle p1	דגם
1.8 ק"ג	משקל
MAH 2200	סוללה
200*150*430 מ"מ	מידות
1.7A--- V14	חשמל
23.8W	הספק

קבלת שירות

לקבלת שירות במסגרת האחריות, צור קשר עם המפיץ או החנות המקוונת שבה קנית את המוצר .

היערך לתאר את המוצר הזקוק לקבלת שירות ואת אופי הבעיה. יש לספק חשבונית קנייה.

כל התיקונים והחלפים טעונים אישור מראש. אפשרויות השירות, זמינות החלקים וזמני התגובה אינם קבועים ועשויים להשתנות. אתה אחראי למשלוח ולעלות המשלוח של המוצר או של כל חלק שלו.

היבואן : "פייל 4 רייל בע"מ"

כתובת : רחוב אנטיב 1, טיילת המלך שלמה, אילת

טלפון – / 050-2718787 / 076-5408377 פקס – 0765101106

מייל: SALES@AQUASPA.CO.IL

אתר: www.shopbool.com