




מכשיר עיסוי רגליים – הוראות הפעלה

דגם: MGF 839

קרא בבקשה בקפידה את הוראות ההפעלה לפני השימוש במוצר

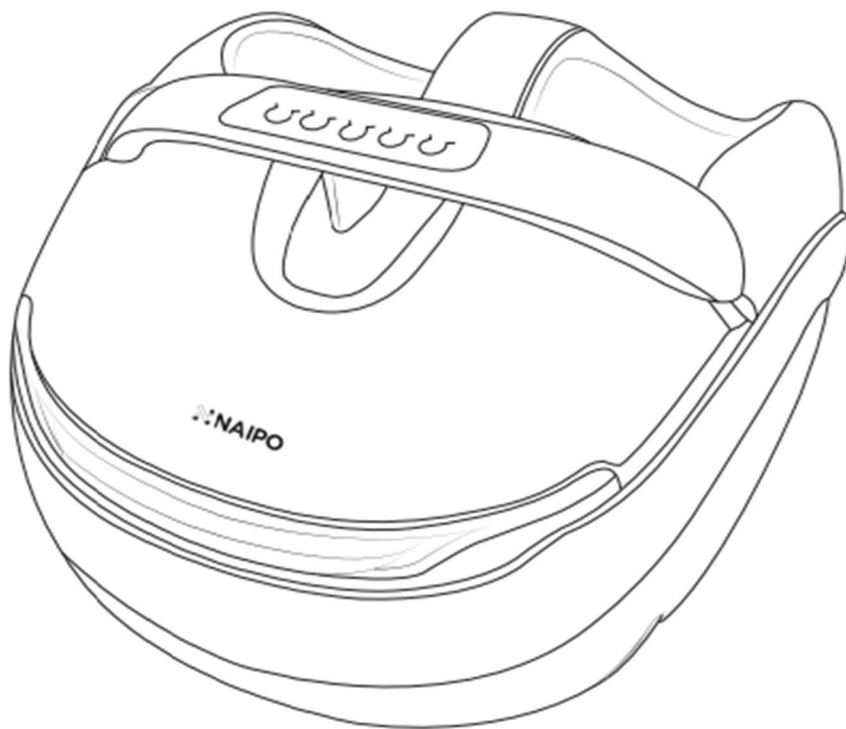

תודה שרכשתם בול !

בכל רכישה שלכם אתם מבטיחים לעצמכם אחריות יבואן מלאה ואבא ואמא שמלווים אתכם הרבה אחרי הקנייה

רק נציין שכלל המוצרים הנמכרים באתר ובחנויות הרשת הם באיכות הגבוהה ביותר ללא פשרות, מלווים באחריות מורחבת ובאישור מכון התקנים הישראלי

" מומלץ להיוועץ עם רופא לפני השימוש"
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח, שהם במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחות. לא משחקים עם המכשיר .

הערכה כוללת:

- מכשיר עיסוי רגליים *1
- מדריך למשתמש *1
- כבל חשמל *1

פרטי המוצר :

שם המוצר	מכשיר עיסוי רגליים
דגם	A839-MGF
מתח	HZ50 /HZ60 240 V100V
צריכת חשמל	W65
טיימר	15 ק"ש

הוראות בטיחות חשובות

סכנה! – כדי להפחית את הסיכוי להתחשמלות תמיד נתק את המוצר מהחשמל לאחר שימוש ולפני ניקוי שלו.


אזהרה – כדי להפחית את הסיכון לשריפה, התחשמלות, או פציעה של אנשים:

- אין להשאיר את מכשיר ללא טיפול כשהוא מחובר לחשמל, נתק מהחשמל כשהמכשיר אינו בשימוש.
- נתק את השקע מהחשמל במהלך סופות ברקים ורעמים.
- אין להפעיל את המכשיר במידה ויש לו כבל או חלק פגום. במידה וחלק נרטב או נפגם אנא צור קשר עם השירות.
- בדוק שהמתח המצוין על המכשיר אכן תואם לאספקת החשמל המקומית שלך.
- אל תשתמש בכף יד חשופה לנתק את התקע מהחשמל כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- אין להפעיל מתחת לשמיכה או כל דבר שיכול לגרום לחימום יתר של המכשיר.
- אין למשוך את הכבל כדי לנתק מהחשמל.
- לא לעקם או ללחוץ את הכבל, השתדלו לשמור עליו בצורתו המקורית למנוע פגיעה באספקת החשמל.
- אל תשמש בכבל כדי לגרור את המכשיר.
- לפני הסרת התקע מהחשמל העבר את כל הכפתורים למצב כיבוי.
- יש להפעיל את המכשיר אך ורק עם הכבל ויחידות אספקת הכוח איתו הוא הגיע.
- יש להפעיל את המכשיר רק במתח המתאים לו המסומן על המכשיר.
- אם כבל החשמל פגום יש להחליפו ע"י היצרן או סוכן השירות על מנת למנוע סכנה.
- אל תשתמש במכשיר אם נשמע רעש חריג מבד"כ.
- חבר את מכשיר העיסוי לשקעים מוארקים עפ"י תקן בלבד.

הוראות בטיחות נוספות

- מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, שימוש מסחרי יבטל אחריות על המוצר.
- אין להשתמש במכשיר שעה לאחר הארוחה.
- אל תשתמש במכשיר כאשר גופך או רגלייך רטובות.
- הפסק את השימוש במידה ואתה חש כאב או אי נוחות.
- המכשיר איננו מיועד לטיפול עצמי בבעיות רפואיות, במידה והינך זקוק לטיפול רפואי פנה לרופא מוסמך.
- אנא התייעץ/התייעצי אם הרופא לפני שימוש במידה וישנם מצבים רפואיים חריגים או במהלך הריון.
- 'זמן השימוש המומלץ הוא 15 דק'.

תיאור המכשיר :

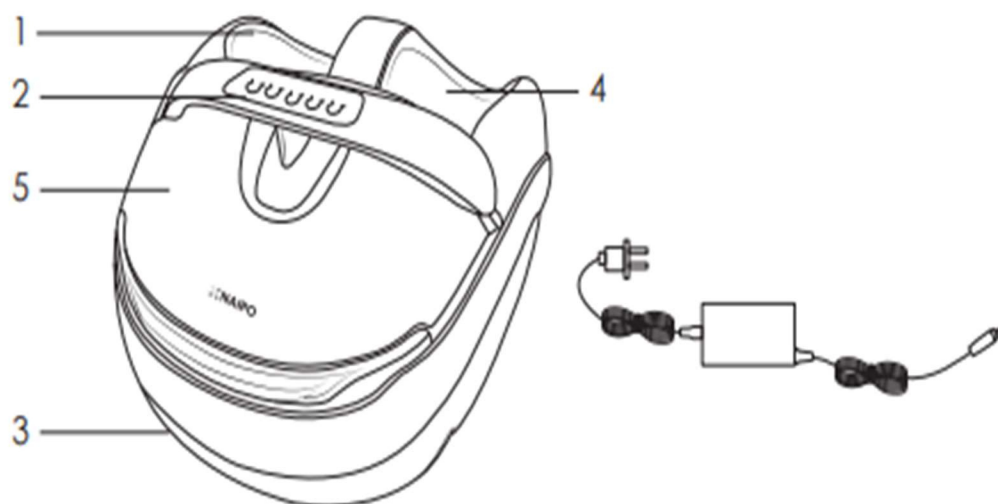

1. רוכסן

2. לוח הפעלה

3. מעטפת תחתונה

4. שרולי רגל ניתנים להסרה

5. מעטפת עליונה

לוח הפעלה



- 'כוח' power : לחץ על כפתור זה כדי להפעיל את המכשיר על תכנית עיסוי אוטומטית, לחיצה נוספת על כפתור זה תעצור את העיסוי.
- מערכת 'ת' : כאשר המכשיר פועל, לחץ על כפתור זה כדי לעבור בין 3 תכניות עיסוי אוטומטיות (אור', ירוק, כחול או אדום – כל חיווי מייצג תכנית אחרת)
- 'מצב': תחת תכנית העיסוי האוטומטית לחץ על כפתור זה כדי לשלוט ברטט ובכריות האוויר המבצעות לחיצות
אור ירוק: הפסקת הרטט כששאר המצבים ימשיכו לפעול
אור כחול: הפסקת עיסוי הגלגלים כששאר המצבים ימשיכו לפעול
אור אדום: כריות אוויר בלבד
הערה: לחיצה ארוכה על כפתור 'מצב' תפעיל רטט בלבד!
- עוצמה: לחץ על כפתור זה כדי להתאים בין 3 רמות עוצמה משתנות: עיסוי חלש, עיסוי בינוני או' עיסוי חזק

אחסון ואחזקה

- טיפול במוצר צריך להיעשות ע"י שירות הלקוחות בלבד ולא ע"י צרכנים פרטיים
- נא לא לשכוח לנתק מהחשמל לאחר השימוש
- אין להשתמש במוצר זה עם השקע אינו תקין או משוחרר
- בעת אחסון יש לסלסל את הכבלים ולשמור על המכשיר במקום יבש ומוצל נטול אבק.
- אל תניח את המוצר ליד איזור עם טמפרטורה גבוהה או ליד מקורות אש וכן המנע מאור שמש ישיר.

- אם הכבל שניתן יחד עם המוצר פגום יש להחליפו ע"י היצרן או שירות הלקוחות.
- נא לנקות מוצר זה עם מטלית יבשה, אין להשתמש במדלל או באלכוהול
- הרכיבים המכניים של מוצר זה תוכננו במיוחד כך שלא יהיה צורך בתחזוקה מיוחדת.
- אל תגלגל או תמשוך את המוצר מעל פני קרקע לא אחידה.
- אין להשתמש במוצר באופן רציף, השתמש בו לסירוגין.

פתרון תקלות

סיבה אפשרית	תקלה
כבל חשמל אינו מחובר, חבר את כבל החשמל כהלכ ה	המוצר אינו עובד
לאחר עבודה ממושכת התחממות יתר של המוצר תעצור את הפעלתו, אנא תן למכשיר להתקרר במשך כשעה לפני שימוש חוזר	
אם הסיימר חלף והמכשיר עצר את הפעלתו, תוכלו ללחוץ לחיצה נוספת על כפתור ההפעלה	עצירה פתאומית
נתק את המוצר מהחשמל, חבר אותו שוב והפעל בשנית	

- אם עדיין ישנה בעיה שאינה נפתרה, אנא צור קשר עם השירות .

קבלת שירות

לקבלת שירות במסגרת האחריות, צור קשר עם המפיץ או החנות המקוונת שבה קנית את המוצר .

היערך לתאר את המוצר הזקוק לקבלת שירות ואת אופי הבעיה. יש לספק חשבונית קנייה.

כל התיקונים והחלפים טעונים אישור מראש. אפשרויות השירות, זמינות החלקים וזמני התגובה אינם קבועים ועשויים להשתנות. אתה אחראי למשלוח ולעלות המשלוח של המוצר או של כל חלק שלו.

היבואן : "פיל פור רייל בע"מ"

כתובת : רחוב אנטיב 1, טיילת המלך שלמה, אילת

טלפון – / 050-2718787 / 076-5408377 פקס – 0765101106

מייל: SALES@AQUASPA.CO.IL

אתר: www.shopbooi.com