


מכשיר לעיסוי יד



תודה שרכשת את מכשיר העיסוי לידיים. אנא קרא מדריך הוראות זה לפני השימוש. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
נא לשמור את ההוראות האלה.

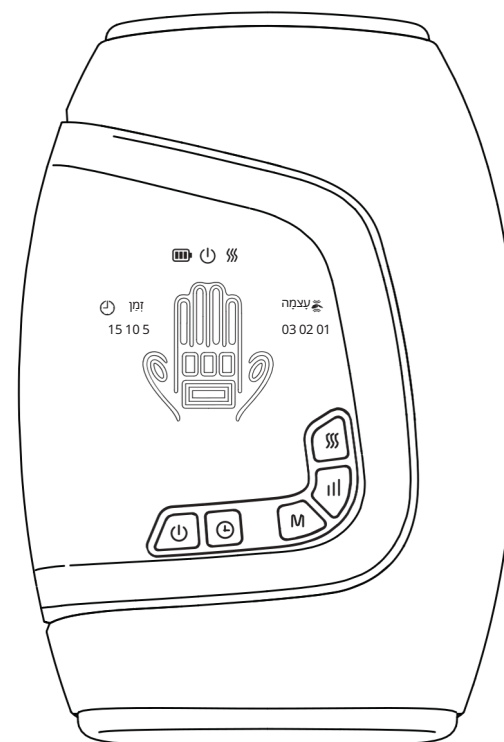

בבקשה קרא את המדריך בקפידה כדי להיות בטוח איך להשתמש במכשיר כהלכה. המדריך מכיל מידע חשוב על איך להפעיל את המכשיר בבטחה ונכון, כדי להמנע מפגיעה כלשהי לך או לסביבה. בבקשה עקוב בקפידה.


- אם מתרחש משהו יוצא מגדר הרגיל, אנא הפסק את השימוש מיד. המשך השימוש יכול לגרום לשוק חשמלי או לסיכון של שריפה. כבה את המכשיר ונתק מהחשמל. אל תנסה לתקן כלום פנה לשירות הלקוחות לתיקון המכשיר.
- וודא כי המכשיר עובד כהלכה לפני השימוש. אל תפתח את המכשיר מכל סיבה שהיא!
- אל תפתח גם אם נכנס משהו אל תוך המכשיר, המכשיר צריך להיות מכוסה כל הזמן.
- אין לפתוח גם אם יש שבר, סדק, קרע או כל נזק אחר. החלקים בפנים עשויים לגרום לפציעות.
- אל תנסה לפרק או לתקן את המכשיר או את פנל ההפעלה. זה מבטל את האחריות ויכול לגרום לנזקים.
- אל תפתח אם חדרו נוזלים אל תוך המכשיר או שהמכשיר היה במגע עם נוזלים או לחות.
- אין להשתמש עם ידיים רטובות או עור רטוב. אין להשתמש בסביבה עם לחות גבוה כולל חדרי אמבטיה. לחות יכולה לגרום לסכנת התחשמלות ולפגוע בתפקוד התקין של המכשיר.
- אין לפתוח בזמן סופת ברקים.
- אין להשאיר בחוץ בזמן טעינה.
- אל תרדם בזמן העיסוי.
- אל תבצע עיסוי עם המכשיר הזה בשום מקום אחר חוץ מהידיים.
- אל תשתמש במכשיר עם בגדים רופפים או עם תכשיטים.
- יש להיות ערני בעת שימוש במכשיר ליד ילדים, אנשים בעלי מוגבלות או חיות.
- האוכלוסיות הבאות צריכות לקבל אישור מגורם רפואי מוסמך כדי להשתמש במכשיר: טרומבוסיס (פקקת), מפרצת קשה, דליות ורידים, זיהום עורי או דלקת בהיפודרמיס.
- מצבים בהם יש צורך במכשירים אלקטרוניים שהם רגישים לשדות אלקטרומגנטיים. למשל קוצב לב.
- סרטן, הריון, סכרת, בעיה סנסורית שגורמת לתחושה ירודה.
- חום, דלקת אקוטית, לחץ דם גבוה, כאב אקוטי ביד.
- דלקת או פגיעה שרירית.

השתמש במוצר רק כמו שמתואר בעלון ההוראות. כל שאר השימושים אינם מומלצים ע"י החברה ועלולים לגרום נזק, תפקוד לקוי או סיכון לשריפה, שוק חשמלי או פגיעה. זכור לשמור את הוראות ההפעלה במקום נגיש ונוח.

תוכן עינינים



2.....	אמצעי בטיחות.
4.....	תרשים.
5.....	הפעלה.
6.....	שימור ואחסון.
7.....	מדריך בעיות.
8.....	מפרט טכני.

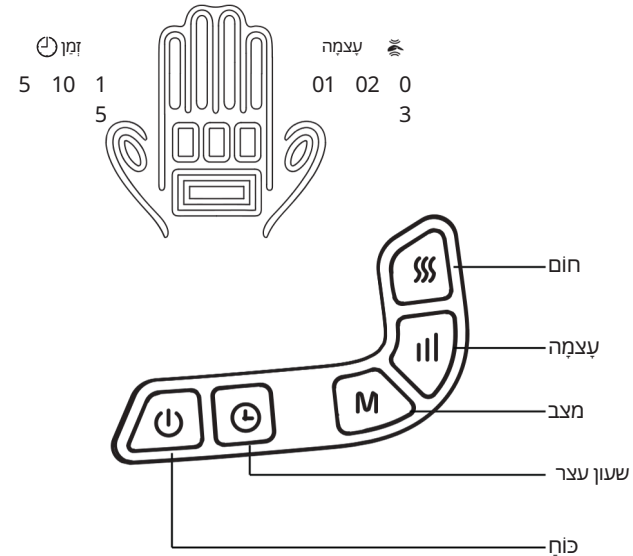

- המוצר מכיל בטריה שאינה ניתנת להחלפה.
- הזהרה: ובעקבות זאת בטריה נטענת, השתמש רק ביחידת טעינה שמגיעה עם המכשיר.

הערה

- אל תעסה את המקום יותר מ 15 דק.
- שימוש מתמשך לפרקי זמן ממושכים עלול לגרום לגירוי יתר של השריר או עצבים ולגרום לפגיעה.
- שימוש מתמשך בחום עלול לגרום לכוויה בדרגה נמוכה.

זהירות

- במצב של הפסקת חשמל, כבה את המכשיר ונתק אותו מהחשמל.
- אל תגע בכבל או בשקע החשמל בידיים רטובות.
- נתק מהחשמל לפני ניקוי.
- כדי למנוע נזק, שוק, או קצר חשמל נתק מהחשמל באמצעות ראש התקע בלבד. (המנע ממשיכת הכבל עצמו)
- אין לעשן בזמן שימוש.
- הפסק את השימוש במוצר אם הוא הופך ללא נוח או נגרם כאב.
- מוצר זה אינו מיועד לטיפול עצמי במצבי שאמורים להיות מטופלי ע"י גורמים מוסמכים.
- המוצר מיועד לשימוש עצמי בלבד. שימוש מסחרי אינו נתמך ומבטל את האחריות.
- אל תפעיל מוצר זה אם הוא מכוסה בשמיכה מכיוון שעלול להתחמם יתר על המידה ליצור דלקה.
- אין לעמוד על המוצר או להפעיל לחץ חזק על המוצר כדי למנוע פגיעה או תפקוד לקוי של המכשיר תקלה או סכנה שריפה.
- אין בקרבת להבות, התקני חימום או גז דליק. פעולה זו עלולה לתפקוד לקוי או שריפה.
- אל תשתמש במוצר אם נעשה שימוש של תרסיס aerosol או מתן חמצן, מה שעלול לגרום לעיוות המוצר, תקלה או שריפה.
- אין להשתמש במסיסים שחוקים כדי לנקות את המכשיר זה עלול לגרום לנזק לחלקים הפנימיים.
- הרחק ילדים וחיות מהמוצר.
- מוצר זה אינו לשימוש ע"י אנשים עם מוגבלויות, נכים, חולים, או מתחת למיטה.
- למכשיר יש משטח מחומם, אנשים חסרי רגישות לחום חייבים להיות זהירים בעת שימוש המכשיר.



ספק כוח

סוללה: 2500mAh (סוללת ליתיום)
 :בערך 3-3.5 שעות זמן טעינה
 מתח כניסה: 100-240V מתח
 פלט: DC5V/2A
 זמן צריכת חשמל: 110-220 דקות (בערך / תלוי בשימוש בחום) הוראות: חבר את שקע החשמל למסאז' היד, וחבר לשקע חשמל. טען במלואו את ה-uPalm לפני השימוש הראשון.

שימור ואחסון



1. ניקיון
 -נתק את היחידה מהחשמל לפני הניקוי -השתמש במטלית מיקרופייבר יבשה כדי לנגב את פני היחידה.
 אל תשתמש בכלי ניקוי שוחקים מכיוון שהגימור המט עלול להישרט בקלות. -אל תשתמש בחומרי ניקוי קורוזיביים מכיוון שהם עלולים לפגוע בגימור. -אל תשתמש בחומר רטוב או לח כדי לנגב את היחידה מכיוון שהוא עלול לגרום נזק למים. -אין לטבול במים או לנסות לשטוף מתחת למים.
2. אחסון
 -כאשר אינו בשימוש, נא למקם באזור יבש ומאוורר ללא חשיפה לאור השמש. -אל תשאיר את היחידה ליד חום גבוה או להבה פתוחה. -נתקן מהחשמל לפני האחסון.



כפתור הפעלה



לחץ כדי להפעיל את מכשיר העיסוי הידני. הגדרת ברירת המחדל מתחילה בעוצמה הנמוכה ביותר ובמצב I.

כפתור חום



לחץ כדי להפעיל את פונקציית החימום. לחץ שוב כדי לכבות.

כפתור מצב



מצב I: מכסה את כל היד - אצבעות, כף היד ושורש כף היד מצב II:
 מכסה רק את האצבעות ואת כף היד מצב III: מכסה רק את כף היד ושורש כף היד. לחץ על לחצן המצב כדי לעבור בין שלושת המצבים.

כפתור עוצמה



לחץ כדי לעבור בין 3 רמות עוצמה - נמוך, בינוני, גבוה

כפתור זמן



לחץ כדי לעבור בין 3 טיימרים מוגדרים מראש - 5/10/15 דקות. הגדרת ברירת המחדל עבור כל התוכניות היא 15 דקות.

שסתום שחרור אוויר

שסתום שחרור החירום הממוקם בצדו התחתון של מעסה היד מאפשר ריקון מיידי ושחרור היד. כל שעליך לעשות הוא לסובב את השסתום 90 מעלות בכיוון המסומן כדי לפתוח את השסתום. פריצת בריאות: אתה יכול גם להשתמש בשסתום כדי להפחית את לחץ דחיסת האוויר על ידי התאמת לטעמך. כל שעליך לעשות הוא לסובב מעט את השסתום כדי לאפשר ריקון של תאי האוויר, עד שהלחץ מרגיש נכון.



מוצר: מכשיר לעיסוי יד דגם: FR-Y18G פלט: DC 5V / 2A
 הספק: 10W טיימר: 15 דקות מפרט סוללה: 3.7V סוללת
 ליתיום תא אחד, 2500mAh

אחריות ותמיכה
 אחריות לשנה מתאריך קבלת המוצר חובה להציג חשבונית קנייה.
 בכל מקרה בו נדרשת עזרה, לאחר קניית המוצר, או בכל בעיה אחרת ניתן ליצור קשר עם
 שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל או בטלפון:
 היבואן: "פיל 4 רייל"
 כתובת: רחוב אנטיב 1, טיילת המלך שלמה, אילת
 טלפון - 076-5408377 / 050-2718787
 מייל: ORDERS@SHOPBOOL.COM
 אתר: WWW.SHOPBOOL.COM
 **** יש להשתמש במכשיר זה רק עם ספק הכוח המצורף Iv0900-2000g
 אזהרה!!!! בשימוש וחיבור ספק הכוח יש להשתמש במקום יבש בלבד סכנת התחשמלות



פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
חבר את כבל החשמל לשקע	כבל החשמל אינו מחובר לחשמל	היחידה לא נדלקת
טען את היחידה עד שהסוללה מלאה	הסוללה מתרוקנת	
לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להתחיל תוכנית נוספת של 15 דקות	טיימר 15 דקות הסתיים	
הסר משקל חיצוני שהונח על היחידה והפעל שוב	משקל חיצוני מונח על היחידה	
תן ליחידה לנוח ולהתקרר לחלוטין, ואז הפעל שוב לשימוש	הגנה מפני התחממות יתר עקב שימוש יתר	חום לא עובד
הימנע משימוש ופנה לשירות הלקוחות	כבל החשמל פגום	כבל החשמל אינו נטען
סובב את שסתום שחרור האוויר בחזרה למצב הנכון	שסתום שחרור האוויר נמצא במצב שגוי	תאי האוויר אינם מתנפחים